

# COMPAT ELLA® PDMS-KABEL

## Möjliggör anslutning till PDMS-system

Compat Ella® PDMS-kabel möjliggör anslutning av Compat Ella® till Patient Data Management Systems (PDMS)\*, vilket hjälper till att visualisera påverkan av den föreskrivna nutritionsbehandlingen och bidra till att förbättra intensivvårdspatienters näringsstatus.


### FUNKTIONER I KORTHET

Tillåter fysisk anslutning till PDMS för att möjliggöra uppföljning av nyckelinformation, såsom flödes hastighet och given volym, via PDMS.

- **Seriell port** möjliggör anslutning genom att konvertera behandlingsinformation från pumpen till standard seriellt format.
- **Överför behandlingsdata** med regelbundna intervaller, samt larm när de uppstår (inklusive varningar och fel).

### DATA TILLGÄNGLIG FRÅN PUMPEN

- Flödes hastighet
- Behandlingsvolym
- Mängd given volym
- Pumpläge (Av, Vänteläge, Paus, Påfyllning, Körläge, Kontinuerligt, Körintervall)
- Intervallläge (På/Av)
- Bolusdos
- Intervalltid
- Tid till avslutad behandling
- Tid till avslutad bolusdos
- Tid till nästa bolusdos
- Varning
- Larm
- Fel

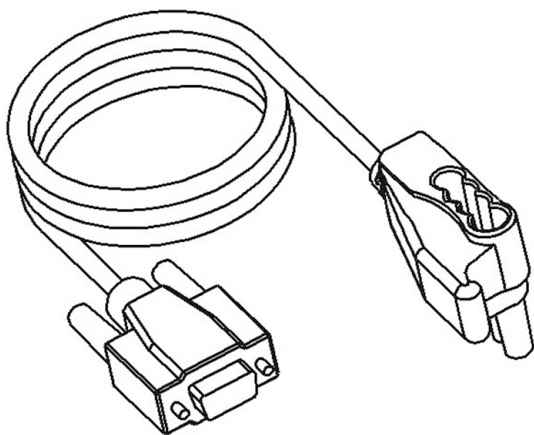

### YTTERLIGARE KOMMUNIKATIONSNOTERINGAR

- Compat Ella® skickar endast data. Ingen kontroll över pumpen är möjlig via PDMS.
- Data uppdateras med regelbundna intervall (1 minut\*\*) och när Compat Ella® stoppas/startas.
- PDMS-programvara tillåter inte att PDMS & Nurse call är aktiverade samtidigt.
- Vid anslutning till PDMS (eller Nurse call) är pumplarmfunktionen oförändrad. Larm kommer enbart att registreras i PDMS-systemet som stopp, men ingen larmfunktion är programmerad i PDMS.

### HÅRDVARA

#### Kommunikationsparametrar:

**Protokoll:** RS232      **Databitar:** 8  
**Baud:** 115200\*\*\*      **Stoppbitar:** 1  
**Paritet:** Ingen      **Flödeskontroll:** Ingen

#### Nätströmsadapter:

- Måste anslutas för att PDMS ska fungera.
- Ger ström till Compat Ella® PDMS-kabel.

#### Seriell server kabeladapter:

- Anpassar Compat Ella® PDMS-kabelkontakt till seriell serveranslutning t.ex. Compat Ella® DB9-hona till seriell server RJ45 (ingår ej).

#### Seriell server:

- Konverterar data från RS-232 till Ethernet (ingår ej).

#### PDMS-server:

- Inkluderar PDMS-programvara och är ansluten till sjukhusnätverket (ingår ej).
- Inkluderar anpassade drivrutiner som används för att översätta data från pump till data som kan användas av PDMS-systemet (ingår ej).

forts.


\* även kallad Kliniska Informationssystem (CIS).

\*\* PDMS-systemet kan visas med olika intervall.

\*\*\* Lägre baud kommer att vara tillgänglig i framtiden.


## COMPAT ELLA® PDMS-KABEL

Vanligaste anordningen

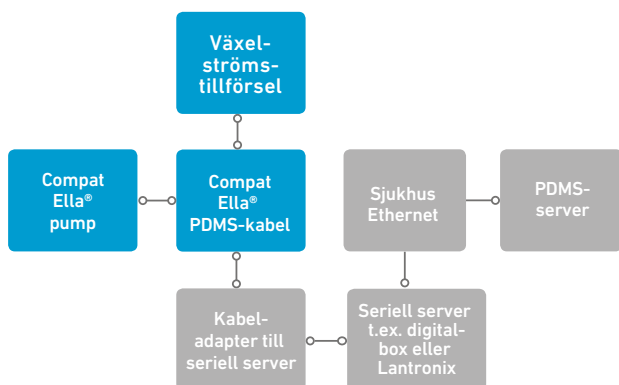

Förteckning:

- Nestlé Health Science
- Tredje part

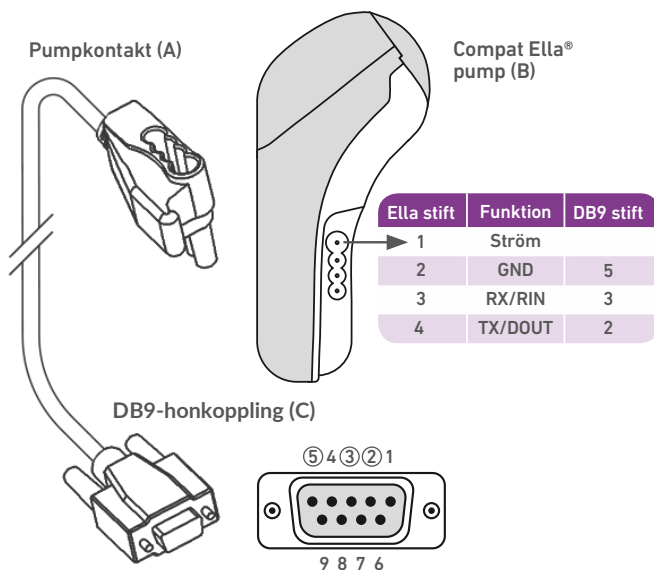

## HÅRDVARA FORTS.

### Compat Ella® PDMS-kabel:

- Inkluderar Compat Ella® växelströmsspänningskontakt (A).
- Inkluderar PDMS-hankoppling kompatibel med Compat Ella® pump (B).
- Inkluderar DB9-honkoppling med aktiva stift 2, 3 och 5 (C).
- Konverterar pumpdata till standard seriellt format, dvs. logiska nivåsignaler till signaler som överensstämmer med 3-tråds RS-232-standard (utförd av den medföljande MAX3321E RS-232-linjedrivrutinen/mottagaren).

### Compat Ella® pump:

- Skickar behandlingsdata till PDMS en gång i minuten.\*\*
- Kommunikationsläget på Compat Ella® måste ställas in som "PDMS" under övriga inställningar.

\*\* PDMS-systemet kan visas med olika intervall.

För ytterligare information, kontakta din Nestlé Health Science-representant eller läs mer på: [www.nestlehealthscience.se](http://www.nestlehealthscience.se). Om inget annat anges ägs alla varumärken av Société des Produits Nestlé S.A. eller används med tillstånd.

## SPECIFIKATIONER

**Förpackning:** 1 styck per kartong (125 x 130 x 85 mm)

**Förvaring:** Rumstemperatur. Utan exponering från solljus och fukt.

**Kabellängd:** 200 cm

**IPX-klassificering:** IPX1

**CE-märkning:** Överensstämmer med europeiska Medical Device Direktiv 93/42 EEC.

## BESTÄLLNINGAR

Produkten kan beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

**E-post:** [order@se.nestle.com](mailto:order@se.nestle.com)

**Telefon:** 020-32 35 00

**Webbshop:** [nestlehealthscience.se/webbshop](http://nestlehealthscience.se/webbshop)

PRODUKTNAMN	BEST.NR.	ANTAL/ KARTONG
Compat Ella® PDMS-kabel	90 04 32	1