

Compat Go® Universal Set, Compat Go® Portable Set

Compat Go®-aggregaten är avsedda för administrering av enteral näringslösning, vätska eller läkemedel och passar för användning med Compat Go® Pump. Compat GO® Portable Set är lämplig att även användas i Compat GO® -ryggsäckarna.

FUNKTIONER I KORTHET

Compat Go®-aggregaten är försedda med ENPlus-koppling till nutritionsbehållare, ENFit® 3-vägs läkemedelsport samt ENFit® distal ände (för anslutning på patientsidan).

Säkrare anslutningar: ENFit™, samt ENPlus-kopplingarna är utformade för att vara inkompatibla med intravenösa system och för att främja patientsäkerheten eftersom de hjälper till att undvika felkopplingar.


Livsmedelsgodkända material: Alla Compat Go®-aggregat är DEHP- och latexfria*.

Compat Go® Universal Set

Försedd med skruvlock av universaltyp med luftfilter.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus glas- och plastförpackningar med bred hals samt glasflaskor med smal hals
- Sonder: ENFit™
- Sprutor: ENFit™

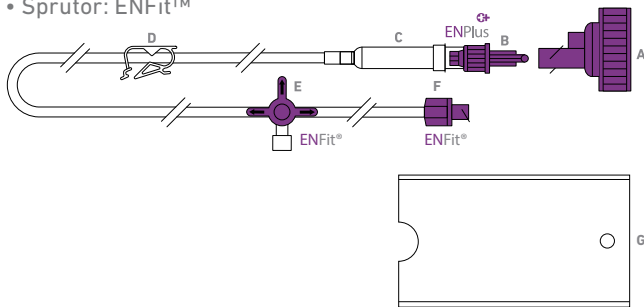


KOMPONENTER

- A** Universal adapter med integrerat luftfilter och ENPlus-port för användning med glas och plastförpackningar (DIN 168-1) samt glasflaskor med smal hals (EN 14634 och EN 14635)
- B** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lock
- C** Droppkammare
- D** Klämma (Anti-freeflow system)
- E** ENFit™ 3-vägs läkemedelsport
- F** ENFit™ distal ände (anslutning på patientsidan)
- G** 500 ml flaskhållare LDPE (Polyeten med låg densitet)

Compat Go® Portable Set

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus
- Sonder: ENFit™
- Sprutor: ENFit™

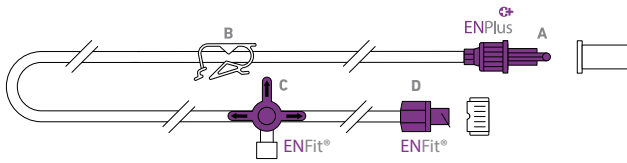

KOMPONENTER

- A** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lås och lock
- B** Klämma (Anti-freeflow system)
- C** ENFit™ 3-vägs läkemedelsport
- D** ENFit™ distal ände (anslutning på patientsidan) med hatt

SPECIFIKATIONER

Sterilitet: Steriliserade med etylenoxid.

Förpackning: Individuellt förpackade i lådor med 30 aggregat.

Compat GO Universal Set (39.1 x 28.8 x 20.9 cm).

Compat GO Portable Set (40 x 22 x 19 cm).

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot solljus och fukt.

Hållbarhet: Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum på förpackningen.

Användningstid: 24 timmar. För engångsbruk.

Slangens längd:

Compat GO Universal Set: Total nominell längd ± 205 cm.

Compat GO Portable Set: Total nominell längd ± 230 cm

Avstånd från näringsbehållare och pump kan anpassas.

Slangdiametrar: Nominell innerdiameter: +/- 3,5 mm.

Nominell ytterdiameter: +/- 5,0 mm.

CE-märkning: Uppfyller det europeiska direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV Rheinland (CE0197).

Ekologiskt fotavtryck: Gröna punkten-symbolen markerar att Nestlé Health Science tar sitt producentansvar och bidrar till finansiering av återvinningen.

Material: Slangar: PVC. Alla material är DEHP och latexfria*. Ytterligare information lämnas på begäran.

BESTÄLLNINGAR

Compat Go-aggregaten kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Produktnamn	Best.nr.	Antal
Compat Go® Universal Set	90 06 04	30 stk
Compat Go® Portable Set	90 06 07	30 stk

För mer information, kontakta Nestlé Health Science Kundservice 020-78 00 20 eller gå in på www.nestlehealthscience.se

*Delarna överskrider inte de maximala koncentrationerna på 0,1 % totalt innehåll av DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat). Ingen latex eller BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen.

® Om inget annat anges tillhör alla varumärken Société des Produits Nestlé SA eller används med tillstånd.

För mer information om ENFit™, besök www.stayconnected.org