

# COMPAT® STAYPUT

## 9/18 FR 120/165 cm ENFit®


Compat® StayPut 9/18 FR är en nasojejunal sond med dubbellumen i polyuretan. Den är avsedd för kritiskt sjuka patienter som behöver tidig enteral administrering av nutrition, vätskor eller läkemedel till tunntarmen och samtidigt magsäcksdränage.


### FUNKTIONER I KORTHET

Compat® StayPut 9/18 FR är utformad för placerings-tekniker med direkt visualisering (t.ex. endoskopi, interventionell radiologi) och faciliterad endoskopisk manipulation.

Den 18 FR dräneringssonden har markeringar för placeringsdjup på var 5:e cm för bedömning av placeringsdjup och kontroll av sondmigration. Båda sonderna är röntgentäta och har en mycket röntgentät spets som gör det lättare att bekräfta korrekt placering. En förmonterad ledare till 9 FR sonden ingår som stöd för placeringen. Ledaren är smord för att minska risken för att sonden rubbas ur sitt läge när ledaren tas bort.

Den jejunala näringssonden är kompatibel med alla administreringsset och sprutor med ENFit®-koppling. ENFit®-kopplingar är utformade för att vara IV-inkompatibla, vilket ökar patientsäkerheten genom att felkopplingar undviks. Den vita kopplingen på magsäckssonden är kompatibel med de flesta dräneringssonder\*.

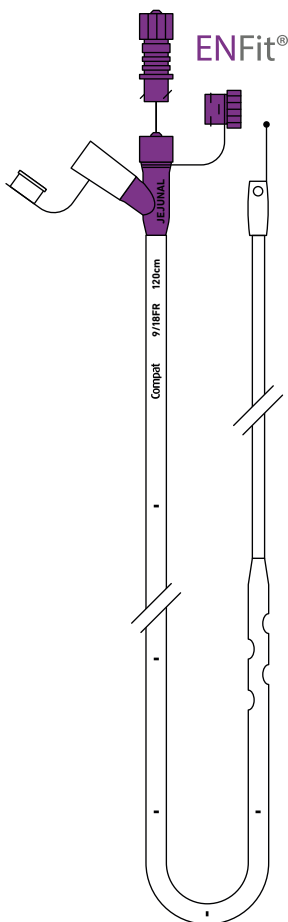

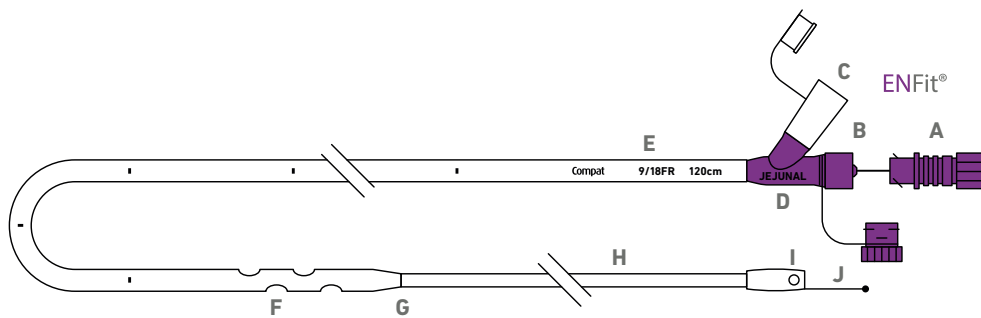

## KOMPONENTER

**A** Försmord och öppen genomflödesledare  
**B** ENFit®-koppling med vridlås och lock för näringssond

**C** Koppling för magsäcksdränage med lock

**D** Sondidentifiering på kopplingen

### Gastrisk sond

**E** 18 FR/120 cm röntgentät magsäckssond med markeringar för placeringsdjup på var 5:e cm

**F** Fyra förskjutna dränagehål på sonden (två på varje sida)

**G** Mycket röntgentät spets

### Jejunal sond

**H** 9 FR/165 cm jejunal röntgentät näringssond

**I** Mycket röntgentät spets med två laterala utgångar för näring och öppen distal ände för placering med hjälp av en preplacerad ledare (denna ledare ingår inte)

**J** Antennspets för att underlätta endoskopisk manipulation

## SPECIFIKATIONER

**Sondens mått:** Gastrisk 18 FR/120 cm/47 tum  
 Ø 6,0/4,8 mm

Jejunal 9 FR/165 cm/65 tum Ø 3,0/2,2 mm

**Sterilitet:** Steriliserade med etylenoxid.

**Förpackning:** Individuellt förpackade i askar med 1 enhet (220 x 25 x 235 mm).

**Förvaring:** Skyddas från direkt solljus och fukt.

**Hållbarhet:** Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.

**Användningstid:** Upp till 29 dagar. För engångsbruk.

**ISO-standard:** Följer helt ISO-standarderna 80369-1. Utformade för att uppfylla den kommande ISO-standarderna 80369-3.

**Miljöavtryck:** "Gröna punkten"-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.

**Material:** Slang: Polyuretan. Koppling: ABS.

Tillverkad utan användning av naturgummilatex, DEHP och BPA. Närmare information på begäran.

## BESTÄLLNINGAR

Produkten kan beställas direkt från Nestlé Sverige AB

**E-post:** [order@se.nestle.com](mailto:order@se.nestle.com)

**Telefon:** 020-32 35 00

**Webbshop:**

[www.nestlehealthscience.se/webbshop](http://www.nestlehealthscience.se/webbshop)

PRODUKTNAMN	BEST.NR.
-------------	----------

Compat® StayPut 9/18 FR 120/165 cm ENFit®	90 06 11
---	----------

**MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:** 1 st

\* Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till [www.compat.com](http://www.compat.com)

® Registrerat varumärke som tillhör Soci t  des Produits Nestl  S.A.

F r mer information om ENFit® bes k [www.stayconnected.org](http://www.stayconnected.org)