

Här är Compat Ella®

Compat Ella® är din nya bärbara pump för enteral nutrition. Den är i varje detalj utformad för att hjälpa sjuksköterskor och vårdare att ägna mer tid åt sina patienter och mindre tid åt att sköta nutritionspumpar. Den är enkel att lära sig, enkel att använda och använder ett språk som är lätt att förstå: ditt eget.

Kommunicera som Compat Ella®

- På flera språk*
- Med en unik färgskärm som gör det enklare att identifiera pumpstatus.
- Med intuitiva ikoner som gör det enkelt att förstå knapparnas funktion.
- Med meddelanden som guidar dig genom användningen av pumpen.

Compat Ella® gör saker enklare

- 30-dagars matningshistorik gör det enklare att kontrollera patientens intag.
- Påfyllning med ett knapptryck ger snabb start av sondmatningen.
- Enkel rengöring under rinnande vatten.
- Behöver bara service vart 5:e år.

Compat Ella®s dolda talanger

- Inställningen «tyst läge» inaktiverar larmet som annars ljuder vid avslutad behandling.
- Möjligheten att låsa behandlingsparametrar kan minska risken för fel vid sondmatning i hemmet.
- Förmågan att kommunicera med PDMS underlättar övervakningen av sondmatning till IVA-patienter.

Enteral nutritionsbehandling har aldrig varit enklare.

Här är Compat Ella®

PUMPEN SOM FÖRENKLAR SONDMATNINGEN.

* fler språk kommer snart



Pumpspecifikationer

Pumpens vikt: 499 g.

Pumpens mått: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.

Batteri: Li-jon. 24 timmar vid 125 ml/h. 6 timmars uppladdningstid.

Apparatklassificering: Uppfyller EG-kraven på medicintekniska produkter av klass IIa.

Kapslingsklass för skydd mot mekanisk påverkan och vatten: IP25.

Underhåll: 5 års serviceintervall.

Compat Ella® produktportfölj

Pumppaket

- Pumpen Compat Ella®
- Nätadapter
- Stativklämma
- Bruksanvisning

Aggregat

- Spike
- Universal
- Dual-spike

Tillbehör

- Ryggsäck/axelväska
- Ryggsäcksstöd/bordsstativ
- PDMS-anslutningskit
- Sladd för patientlarm

Här är Compat Ella® online

Websida: www.compatella.com

Träningsmöjlighet: www.trainingcentre.compatella.com

« Ett interaktivt och engagerande sätt att lära sig att använda Compat Ella®. Teoretisk och praktisk undervisning med videor, handledning och övningar på flera språk. »

Compat Ella® hittas även på sidan www.medicininstruktioner.se!

Beställningsuppgifter

Beställ Compat Ella via Nestlé Health Science Konsumentrådgivning.

Telefonnummer: 020-78 00 20

E-mail: nestlehealthscience@se.nestle.com

*Mer information finns i bruksanvisningen till Compat Ella® eller kan beställas.

*Om inte annat anges, tillhör alla varumärken Société des Produits Nestlé S.A. eller används med tillstånd.
(1) Bioinformatics assistance of metabolic and nutrition management in the ICU Mette M. Berger and Yok Ai Que Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2011, 14:202-208. / Impact of a computerized information system on quality of nutritional support in the ICU Nutrition Mette Berger et al 22 (2006) 221-229 / Strack van Schijndel, et al. Computer-aided support and nutrients in the ICU. The Netherland Journal of Medicine december 2009, vol. 67, no 11: 388-393

Kontaktadress:

Nestlé Health Science
Box 6026, 115 26 Stockholm

NestléHealthScience
Compat ella®

NestléHealthScience

Compat ella®

Bärbar pump för enteral nutrition



Här är Compat Ella®

PUMPEN FÖR ENKLARE SONDMATNING.

NHSM000075/04-2017

Tillförlitlig tillförsel

- +/- 5% tillförselnoggrannhet
- **AAFF-teknik:** Felsäker, automatisk, friflödes-skydd som är kassettbaserad och alltid aktiv.
- Topmodern larmdetektion.



Larm som syns

- Färgkodade, lätt identifierbara ikoner och texter gör det enkelt att snabbt åtgärda problem.
- Separata larm för luft i slangen och ocklusioner uppströms- och nedströms.
- Särskild skärmbild och unikt meddelande för varje larm.

Valmöjligheter för patienten

- **Nutritionsbehandling i kontinuerligt läge eller intervalläge.**
- Med eller utan volymbegränsning.
- Tillför från 1 ml till 4000 ml med flödes-hastigheter mellan 1 ml/h och 600 ml/h.



Ta med Compat Ella®


- **Compat Ella® är liten och lätt och får utan problem plats i en ryggsäck.**
- Batteriet räcker till sondmatning hela dagen, vid tillförselhastighet 125 ml/h (testat med vatten).

Sondmatningsaggregat

- Spike set, dual spike set samt univertal set med ENPlus-koppling
- **Säkrare kopplingar:** ENFit™- och ENPluskopplingarna är konstruerade för att inte gå att använda med IV-produkter
- Administreringsseten för Compat Ella® innehåller inte DEHP, BPA eller latex

Lättåtkomlig information

- **30-dagars volymhistorik** möjliggör noggrann kontroll av faktiskt tillförda volymer under lång tid
- Separat information om aktuell tillförsel och kumulativ tillförsel

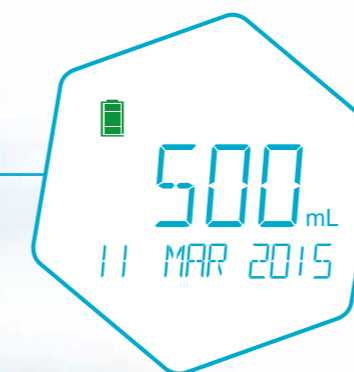

Enkel att hålla ren

- **Compat Ella® är enkel att rengöra under rinnande vatten**
- En rad desinfektionsmedel kan också användas för bättre hygien*



Språkval

- **Möjlighet att välja språk på skärmen gör det lättare för användaren att förstå informationen**
- 14 språk att välja mellan som exempelvis Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, holländska, svenska, danska, norska och finska.

Anpassningsbar

- Enkel inställning av larmets ljudnivå och skärmens ljusstyrka
- Knappsatslös förhindrar oavsiktliga knapptryckningar

Uppkoppling

- **PDMS-/CIS**-anslutning för enklare nutritionsövervakning av IVA-patienter***
- Automatiserad registrering av näringstillförsel kan bidra till att förbättra patientens näringsstöd och minska vårdpersonalens arbetsbelastning⁽¹⁾
- Patientlarmsfunktion möjliggör snabbare åtgärder

Ger trygghet

- **Möjlighet att läsa parametrarna** för nutritions-behandlingen gör att oerfarna patienter kan känna sig säkra på att få rätt näringstillförsel

Ger nattro

- **Larmet vid avslutad behandling kan lätt inaktiveras för att ge patienterna nattro**



Ökad trygghet

Topmodern tillförselnoggrannhet innebär att Compat Ella® kontrollerar att den mängd som programmerats också tillförs.* Vid fel visar larm-meddelandet vad problemet är så att det lätt kan åtgärdas.

Funktionell excellens

Flera språk. Rullande 30-dagarsmatningshistorik. PDMS-anslutning. Parameterläs. Compat Ella® har också avancerade inbyggda och lättåtkomliga funktioner.

En uthållig partner

Med det kraftfulla batteriet kan Compat Ella® arbeta hela dygnet, varje dag. Med möjligheten att rengöra pumpen under rinnande vatten och 5 års serviceintervall kan du förvänta dig att Compat Ella® alltid är redo.

*Mer information lämnas på begäran.
**PDMS: System för hantering av patientdata, CIS: Kliniskt Informationssystem.

Här är Compat Ella®

PUMPEN SOM FÖRENKLAR SONDMATNINGEN.