

## COMPAT® STAYPUT

### Nasojejunal sond med dubbellumen för samtidigt magsäcksdränage


Compat® StayPut 9/18 FR är en dubbellumen nasojejunal sond med ENFit®-koppling och integrerat magsäcksdränage. Den är avsedd för kritiskt sjuka patienter som behöver tidig enteral administrering av nutrition, vätskor eller läkemedel till tunntarmen och samtidigt magsäcksdränage, genom en näsborre.


#### FUNKTIONER I KORTHET

Compat® StayPut 9/18 FR är utformad för placeringstekniker med direkt visualisering (t.ex. endoskopi, interventionell radiologi) och faciliterad endoskopisk manipulation.

Den 18 FR dräneringssonden har markeringar för placeringsdjup på var 5:e cm för bedömning av placeringsdjup och kontroll av sondmigration. Båda sönerna är röntgentäta och har en mycket röntgentät spets som gör det lättare att bekräfta korrekt placering. En förmonterad och öppen genomflödesledare till 9 FR sonden ingår som stöd för placeringen. Ledaren är smord för att minska risken för att sonden rubbas ur sitt läge när ledaren tas bort.

Den jejunala näringssonden är kompatibel med alla administreringsset och sprutor med ENFit®-koppling. ENFit®-kopplingar är utformade för att vara IV-inkompatibla, vilket ökar patientsäkerheten genom att felkopplingar undviks. Den vita kopplingen på magsäckssonden är kompatibel med de flesta dräneringssonder\*.

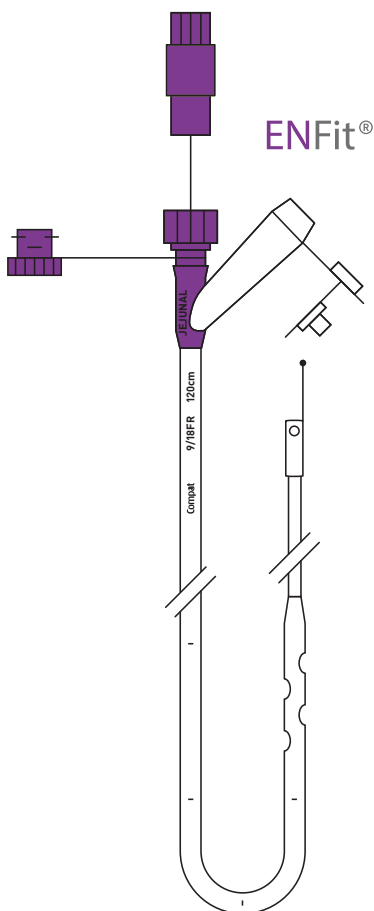

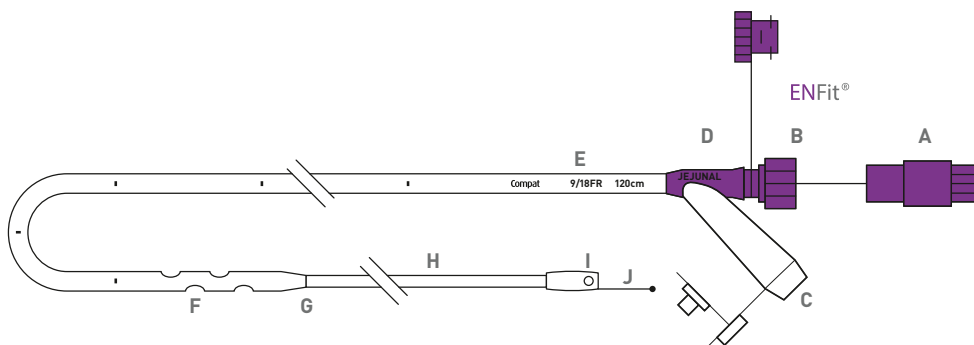

## KOMPONENTER

- A** Försmord och öppen genomflödesledare
- B** ENFit®-koppling med vridlås och lock för näringssond
- C** Koppling med lock, utformad för att vara kompatibel med de flesta magsäcksdränage
- D** Sondidentifiering på kopplingen

### Gastrisk sond

- E** 18 FR/120 cm röntgentät magsäckssond med markeringar för placeringsdjup på var 5:e cm
- F** Fyra förskjutna dränagehål på sonden (två på varje sida)
- G** Mycket röntgentät spets

### Jejunal sond

- H** 9 FR/165 cm jejunal röntgentät näringssond
- I** Mycket röntgentät spets med två laterala utgångar för näring och öppen distal ände för placering med hjälp av en preplacerad ledare (denna ledare ingår inte)
- J** Antennspets för att underlätta endoskopisk manipulation

## SPECIFIKATIONER

**Sondens mått:** Gastrisk 18 FR/120 cm Ø6,0/4,8 mm

**Jejunal 9 FR/165 cm Ø3,0/2,2 mm**

**Sterilitet:** Steriliserade med etylenoxid.

**Förpackning:** Individuellt förpackade i askar med 1 enhet (2,3 x 19 x 25 cm).

**Förvaring:** Skyddas från direkt solljus och fukt.

**Hållbarhet:** Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.

**Användningstid:** Upp till 29 dagar. För engångsbruk.

**ISO-standard:** Följer ISO-standard 80369-3.

**CE-märkning:** Överensstämmer med det europeiska medicintekniska direktivet 93/42 EEC. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).

**Juridisk tillverkare:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).

**Miljöavtryck:** "Gröna punkten"-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.

**Material:** Slang: Polyuretan. ENFit®-koppling: Sampolyester. Koppling: Polyuretan. DEHP-, BPA- och latexfri\*\*.

**Ursprungsland:** Tillverkad i Italien.

## BESTÄLLNINGAR

Produkten kan beställas direkt från Nestlé Sverige AB

**E-post:** [order@se.nestle.com](mailto:order@se.nestle.com)

**Telefon:** 020-32 35 00

**Webbshop:**

[www.nestlehealthscience.se/webbshop](http://www.nestlehealthscience.se/webbshop)

| PRODUKTNAMN                              | BEST.NR. |
|--|----------|
| Compat® StayPut<br>9/18 FR<br>165/120 cm | 90 06 61 |

**MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:** 1 st

\* Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

\*\* BPA, Latex och Ftalater inklusive DEHP är inte avsiktligt tillsatt under tillverkningsprocessen.

För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till [www.compat.com](http://www.compat.com)

Om inget annat anges används alla varumärken med tillstånd.